

EstheShot






Polyester for Esthetic Denture Base

Bright

エステショット ブライトは
「つよさ」と「しなやかさ」をあわせ持った
新しいポリエステル樹脂の熱可塑性レジンです。



エステショットブライトの特徴

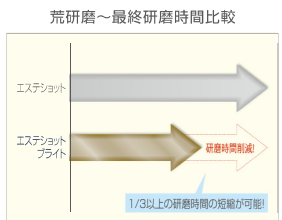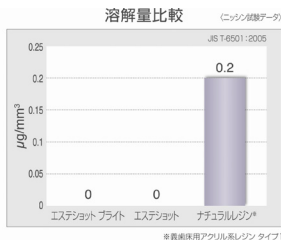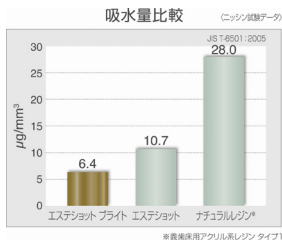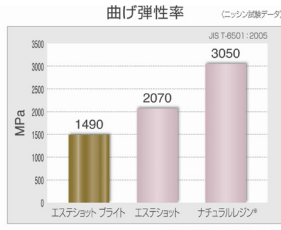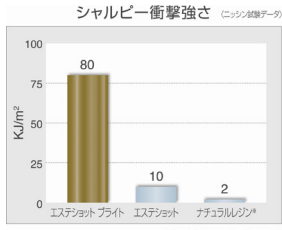

- 新素材（ポリエステル共重合体）
- 適度なやわらかさとしなやかさをもち合わせています。
- 衝撃的な力に対して強くなりました。
- 安心して使い続けられるように、残留モノマーや溶出物を低減しました。
- 審美性を損ないにくい低吸水性
- 常温重合型レジンとの良好な接着性
- 良好な研磨性
 - ※ 今までのポリエステル樹脂に比べて、1/3 以上研磨時間が短縮できます。

洗浄について

- 義歯は定期的に洗浄を行って下さい。
(毎日の洗浄をお勧めします。)
 - 歯ブラシを使用する場合は、柔らかい歯ブラシで、歯磨き粉を付けずに洗浄してください。
 - 超音波洗浄器で洗浄する場合は、水温が高温にならないように注意してください。
 - 推奨する義歯洗浄剤
 - 歯科医院用・・・フィジオクリーン プロ ※
 - 患者様用・・・フィジオクリーン キラリ錠剤 ※
- ※ (株)ニッシン製

リベースについて

- 直接法でのリベースが可能です
(加熱重合タイプのリベースは出来ません。)

注意点

- pH12 を越える強アルカリ性の洗浄剤は使用しないでください。
- 煮沸消毒はしないでください。
変形・変色の原因になります。

お問い合わせ

販売名: エステショット ブライト 一般的名称: 義歯床用熱可塑性レジン 分類: 管理医療機器医療機器認証番号: 223AFBZX00104000

製造販売元: 株式会社 ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

販売元: 株式会社アイキャスト 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町 513 番地 8F